



Test de inmunoensayo fecal (FIT cuantitativo) para la detección temprana de Cáncer de Colon.

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRA EN MATERIA FECAL

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de recolectar la muestra.

Los resultados pueden ser inválidos si la prueba no se realiza correctamente.

PRECAUCIONES GENERALES

- A) Mantener el tubo alejado del alcance de los niños.
- B) No intente abrir el tapón perforable incoloro.
- C) El líquido contenido en el tubo no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con los ojos o con membranas mucosas. El tubo ha sido especialmente diseñado para evitar cualquier pérdida de líquido. Acuda inmediatamente a un médico si se produce un contacto con el líquido.
- D) No introduzca el tubo ni parte del mismo en el ano.
- E) No realice la recolección de heces si tiene diarrea, si tiene cualquier sangrado por el recto (por ej. hemorroides u otras causas) durante la menstruación o si las heces están contaminadas por la orina.
- F) Realice la recolección inmediatamente después de la defecación.
- G) Use el aparato una solo vez.
- H) No desenroscar el tapón verde luego de finalizada la recolección.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA


1



Complete en la etiqueta del tubo la información solicitada:

- Fecha de recolección.
- Código de identificación de la muestra.
- Nombre del paciente.

2

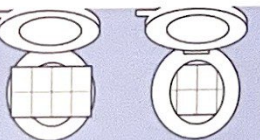

Coloque el papel recolector dentro del inodoro por encima del agua.

3




Deposite la materia fecal encima del papel. Manteniendo el tubo recto, desenrosque el tapón verde con el palito de recolección incorporado. No sacuda el tubo volteándolo arriba abajo.

4



Tome la muestra de materia fecal con el palito del frasco recolector antes que la hoja de recolección se hunda.

5

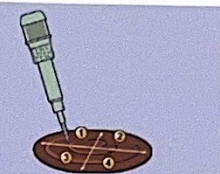


Introduzca el palito en 4 lugares diferentes, rascando la superficie con un movimiento transversal. Deben cubrirse con heces solo las muescas del palito. No recoja un exceso de heces.

6



Expulse el agua, la hoja de recolección es biodegradable y no afectará el drenaje.

7

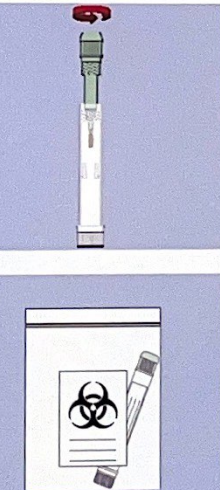

Vuelva a colocar el tapón verde y enrosque fuertemente. No lo vuelva a abrir. Sacuda suavemente el tubo volteándolo arriba abajo.

Complete con sus datos en el sticker de la bolsita con cierre hermético y coloque el frasco dentro.

Para conservar la muestra mientras no sea remitida, es indispensable guardarla en la heladera.

REMITIR AL LABORATORIO, INSTITUCIÓN O A SU MÉDICO

Introduzca en el sobre de papel la bolsita de cierre hermético con la muestra, complete sus datos y entréguelo a quien corresponda, según indicaciones de su médico.